




臨床ケースレポート

医療用品4. 整形用品 高度管理医療機器 人工骨インプラント アパセラム-L4


APACERAM®

頚椎症性脊髄症（77歳・男性）

糸締結手順

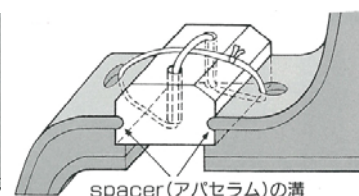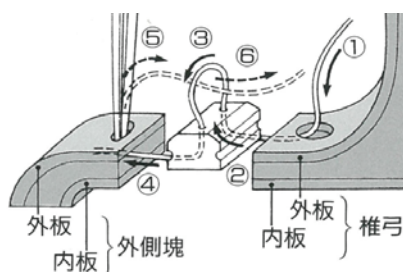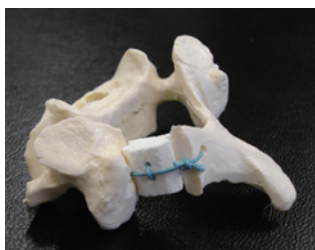


CT 画像

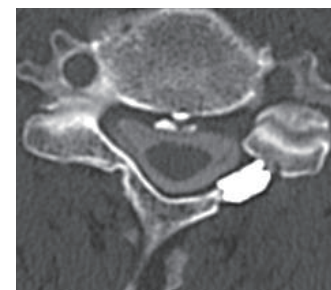

正面



側面

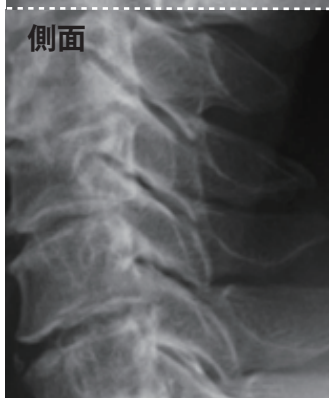

術 前

術後 1 週間

術後 4 年

L4-153-KB-KD



スペーサ側面に施した溝と切離した椎弓面が安定した状態で接置され、工夫された糸固定により強固な締結が可能となり術後4年を経過しても定位置に保たれている。脊柱管は十分に拡大され脊髄の除圧は良好である。1996年から800症例以上に使用し安全かつ有効な成績が得られている。

監修：高岡整志会病院 川岸 利光 院長

ハイドロキシアパタイト人工骨

椎弓スペーサ(片開き)

特 徴


- 椎弓形成術 片開き用スペーサ
- 項靱帯・棘間靱帯を温存
- サイズ 8 ～ 13 mm (1mm 刻み) の 6 種類

椎弓スペーサの種類

略称：人工骨・AB-13

包装：1個入り

L4-153-KB・KD

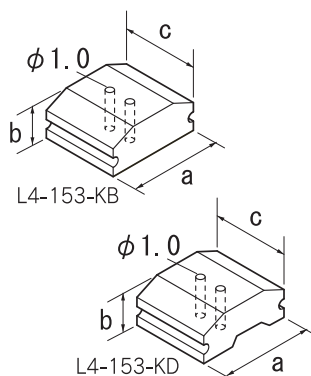


アパセラム-L4 医療機器承認番号：22200BZX00811000

● トライアル用意できます。

品 番	気孔率 (%)	定形寸法 (mm)			包 装
		a	b	c	
L4-153-KB-000-08	40	8	5	10	1個入
L4-153-KB-000-09		9	5	10	
L4-153-KB-000-10		10	5	10	
L4-153-KB-000-11		11	5	10	
L4-153-KB-000-12		12	5	10	
L4-153-KD-000-13		13	5	10	

椎弓スペーサの使用例

L4-153-KB

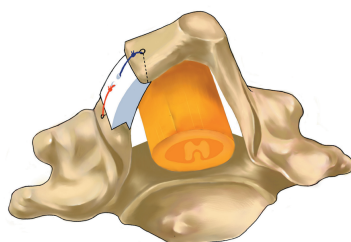

製造販売業者

HOYA Technosurgical 株式会社

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-4

TEL 03-5369-1710 FAX 03-5369-1711

■札幌オフィス 〒060-0007 札幌市中央区北七条西13-9-1 TEL:011-241-3473 FAX:011-241-3472

■仙台オフィス 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-7-1 TEL:022-371-6944 FAX:022-371-8924

■名古屋オフィス 〒461-0001 名古屋市東区泉1-21-27 TEL:052-955-8572 FAX:052-955-8573

■大阪オフィス 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 TEL:06-6263-1679 FAX:06-6263-1686

■福岡オフィス 〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町3-8 TEL:092-281-6860 FAX:092-281-6869

URL www.hoyatechnosurgical.co.jp

※仕様、形状は一部変更することもあります。

※掲載の写真・形状図は実物大ではありません。

ご注文先

益子工場

〒321-4292 栃木県芳賀郡益子町大字塙858

TEL 0285-72-6253 FAX 0285-72-6259

販売店